



PROFI CARE®

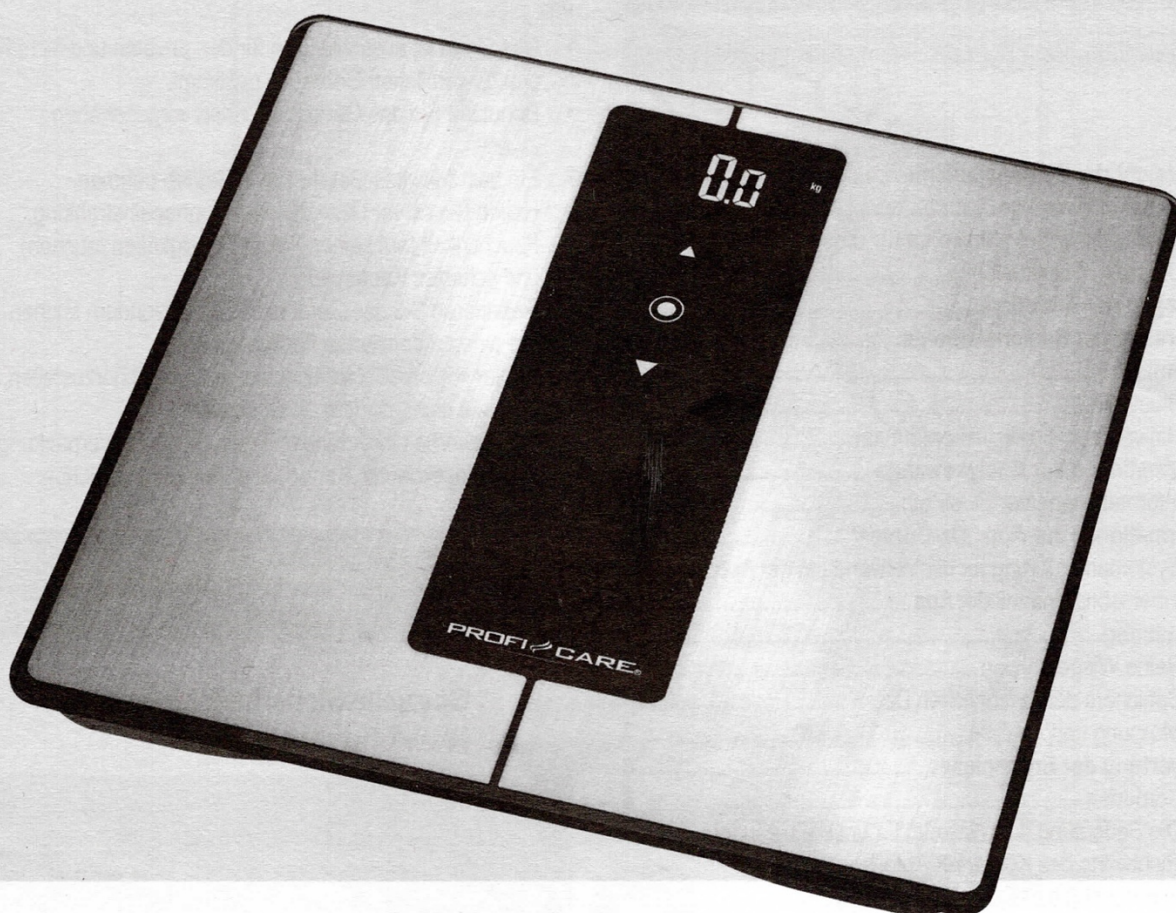


Profi Care 9 i 1 vægt

Betjeningsselementerne

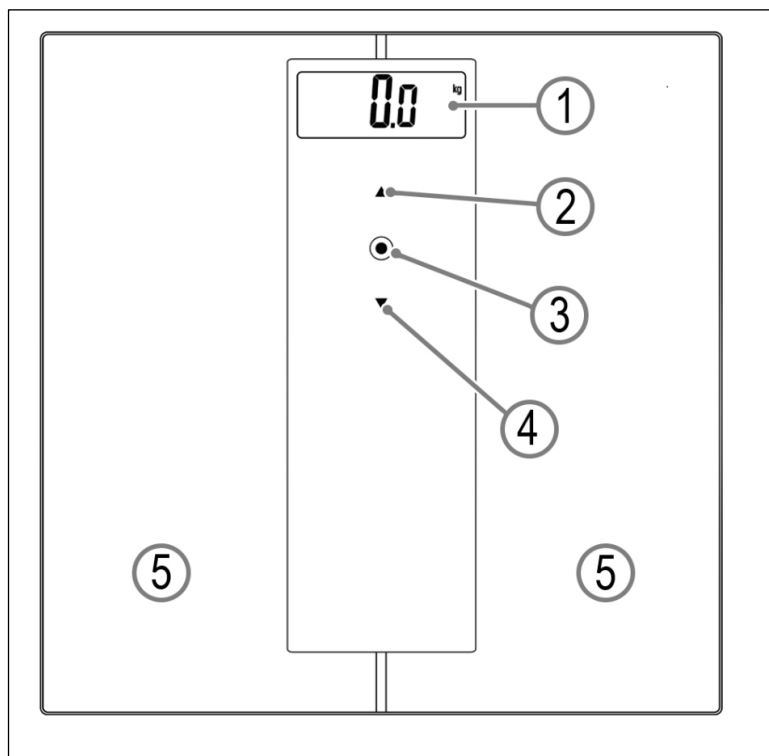

Display

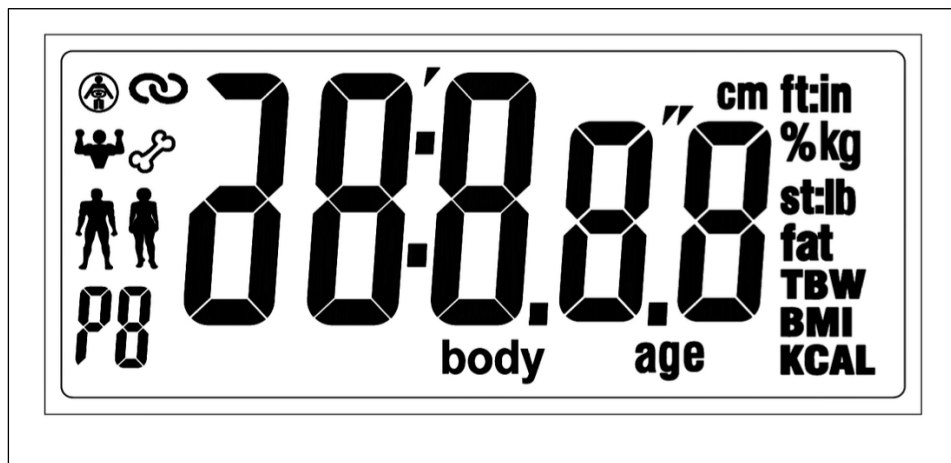

Brugsanvisning

Tak fordi du valgte vores produkt. Vi håber du vil nyde at bruge enheden. Symboler i denne vejledning.

Vigtige bemærkninger til din sikkerhed vil være specielt markeret. Det er vigtigt, at du følger disse instruktioner for at undgå ulykker og beskadigelse af enheden:

- **ADVARSEL:** Advarer mod farer for dit helbred og indikerer mulige risici for personskade.
- **FARE:** Angiver mulige farer for enheden eller andre genstande.
- **BEMÆRK:** Fremhæver tip og information til dig.

Indhold

Oversigt over betjeningslementerne	1
Indhold	2
Generel information.....	3
Særlige sikkerhedsinstruktioner for denne enhed	3
Håndtering af batterier	4
Isætning af batterier	4
Oversigt over betjeningslementerne	6
Tekniske data	6
Bluetooth	6
Bemærkning om direktivets overensstemmelse.....	6
Oplysninger om den analytiske balance.....	6
Oplysninger om Bluetooth	7
Oplysninger om "Dr. Curve + "	7
Systemkrav til brug af appen.....	7
Idriftsættelse med appen.....	7
Brug.....	8
Ren vejefunktion	8
Lagring af personlige data	8
Måling og analyse.....	9
Evalueringsresultaterne	10
Kropsfedt.....	10
Vandets betydning for vores helbred.....	10
Vejledningsværdier for procentdelen af kropsfedt i procent (omtrentlige tal)	11
Referenceværdier for kropsvandindhold og muskelmasseprocent i procent (omtrentlige tal)	11
Referenceværdier for knoglevægt i kg (omtrentlige tal).....	11
BMR (Basal Metabolic Rate).....	11
Vejledende værdier for det daglige kaloriebehov uden fysisk aktivitet.....	11
BMI (Body Mass Index)	12
Vejledende værdier for BMI.....	12
Vejledende værdier for det viscerale fedtindhold (omtrentlige tal)	12
Displayvisninger og fejlmeddelelser.....	12
Rengøring	13
Garantibetingelser	13
Garantibehandling	13
Bortskaffelse af batteri.....	14
Betydning af symbolet "skraldespand"	14

Generel information

Inden du bruger denne enhed, skal du læse betjeningsvejledningen meget nøje og opbevare dem på et sikkert sted inklusive garantibevis, kvittering og om muligt æsken med den indvendige emballage. Hvis du videregiver enheden til tredjemand, skal du også medtage betjeningsvejledningen.

- Enheden er udelukkende beregnet til privat og ikke til kommerciel brug.
- Brug kun enheden til det tilsigtede formål.
- Brug ikke en beskadiget enhed.
- Hold det væk fra varme, direkte sollys, fugt (aldrig nedsænkes i væsker) og skarpe kanter væk.
- Reparer ikke enheden selv, søg efter den En autoriseret specialist.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de gør det at de ikke leger med enheden.
- Efterlad ikke emballage af hensyn til dine børn dele (plastikposer, papkasser, styropor osv.) er inden for rækkevidde.

ADVARSEL: Lad ikke børn lege med folie. Der er *risiko for kvælning!*

Særlige sikkerhedsinstruktioner for denne enhed

ADVARSEL: Hvis vejeoverfladen er fugtig, eller der er vanddråber på den, skal du tørre den af eller tørre den af først, der er risiko for at *glide*.

FARE:

- Håndter vægten med forsigtighed, da det er et måleinstrument. Sænk ikke eller spring på den.
- Belast ikke enheden med mere end 180 kg (396,8 lb, 28: 31/2 st: lb) for at undgå beskadigelse af enheden.
- Hvis vægten skal flyttes, skal du gøre det i vandret position.
- Skalaen til kropsfedtanalyse er ikke egnet til følgende gruppe mennesker:
 - Børn under 6 år og voksne over 100 år
 - Personer med symptomer på feber, ødem eller knogleskørhed
 - Personer i dialyse
 - Personer med en pacemaker
 - Folk, der tager Kardiovaskulær medicin
 - Gravide
 - Atleter, der udfører intens fysisk aktivitet i mere end 5 timer om dagen
 - Mennesker med en puls på mindre end 60 bpm i minuttet
 - Mennesker med betydelige anatomiske afvigelser i deres ben i forhold til deres samlede kropsstørrelse (benlængde forkortet eller forlænget betydeligt).

Håndtering af batterier



Oplad **ikke** batterier!



Åbn ikke batterier!



Bemærk polaritet (+/-)!



Kortslut ikke batterier!



Eksplodingsfare! Udsæt ikke batterier for overdreven varme som f.eks solskin, ild eller lignende.

Isætning af batterier

(Batterier ikke inkluderet)

1. Åbn batterirummet i bunden.
2. Isæt 3 AAA / R03-batterier. Vær opmærksom på den korrekte polaritet (se bunden af batterirummet)!
3. Luk batterirummet igen.
4. Hvis meddelelsen "Lo" vises i displayet, skal du udskifte batterierne.

Oversigt over betjeningslementerne

1. Skærm
2. ▲ Knap
3. ● Knap
4. ▼ Knap
5. Kontaktflader

Undersiden (ikke vist) batterirummet

Vises i displayet	Betydning
P0 – P9	Brugerens lagerplads
	Mand
	Kvinde
cm (ft:in)	Højde
age	Alder
kg (lb / st:lb)	Kropsvægt
fat	Visning af kropsfedt
	Viser muskelmasse
TBW	Viser kropsvand (væske)
	Viser knoglevægt
%	Procentdel - kropsfedt / muskelmasse / kropsvand (væske)
KCAL	Basal metabolisk hastighed af det daglige energibehov i kilokalorier (BMR)
BMI	Body Mass Index
	Visceralt fedtvisning (organfedt)
body age	Biologisk alder
	Bluetooth-forbindelse til appen blev oprettet

Tekniske data

Modell:PC-PW 3008 BT
Strømforsyning: 3 batterier 1,5 V Typ „AAA“ / „R03“
Enhedens nettovægt: ca. 1,7 kg
Opbevaringsrum:10
Højde: fra 80 til 220 cm (2'7 1/2" - 7'2 1/2" ft:in)
Alder: fra 6 til 100 år
Mindste vægt: fra 5,0 kg (11.0 lb / 0: 11 st:lb)
Højeste vægt: 180 kg (396.8 lb / 28: 31 1/2 st:lb)
Opløsning til vægtmåling: 100 g (0.2 lb / 1/4 st:lb) trin
Kropsfedt klassificering: 0,1 %
Kropsvædske Klassifikation: 0,1 %
Anbefalet driftsmiljø:
 Temperatur: 0 °C - 40 °C / 32 °F - 104°F
 Relativ luftfugtighed: < 85 %
Måleområde for kropsfedt: 5 % - 85 %
Måleområde for kropsvand: 7 % - 75 %
Muskelmasse måleområde: 13 % - 82 %
Knoglevægt måleområde: 0,5 kg - 8 kg

Bluetooth

Bluetooth-support:V4.1
Maksimal udstrålet transmissionseffekt: 2,5 mW
Rækkevidde:ca. 15 meter
Transmissionsfrekvens: 2,4 Ghz
Med forbehold for tekniske og designmæssige ændringer under konstant produktudvikling.

Bemærkning om overholdelse af direktivet.

Clatronic International GmbH erklærer hermed, at radiosystemtypen PC-PW 3008 BT er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU.

Derudover overholder enheden RoHS-direktivet 2011/65 / EG.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:

www.sli24.de

Indtast modelnavnet PC-PW 3008 BT i området "Downloads". Testet til drift i Tyskland.

Oplysninger om den analytiske balance

ADVARSEL:

Brug ikke vægten, hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk implantat med elektroniske komponenter. Målingen kan forringe implantatets funktion.

Det grundlæggende princip for denne enhed er baseret på måling af kroppens elektriske impedans. For at gøre dette lader enheden et svagt, umærkeligt, elektrisk signal strømme gennem din krop for at bestemme kroppens aktuelle værdier.

Signalet er generelt helt harmløst! Ikke desto mindre skal du kigge på vores specielle sikkerhedsinstruktioner!

Målingen er kendt under betegnelsen "bioelektrisk impedansanalyse" (BIA), en faktor der er relateret til kropsfedt og kropsvandindhold og er relateret til andre biologiske data (alder, køn, kropsstørrelse).

Oplysninger om Bluetooth

Bluetooth er en teknologi til trådløs radioforbindelse mellem enheder over en kort afstand. Enheder med Bluetooth-standard transmitterer i ISM-båndet (industrielt, videnskabeligt og medicinsk) mellem 2.402 og 2.480 GHz. Forstyrrelser kan dog f.eks. skyldes WLAN-netværk, DAB-radioer, trådløse telefoner eller mikrobølgeovne, der fungerer i det samme frekvensbånd.

Disse skalaer giver dig mulighed for at overføre de bestemte data til din smartphone, tablet eller PC via Bluetooth. For yderligere information henvises til det næste afsnit (Information om "Dr. Curve +" - app'en).

På grund af de forskellige enhedsproducenter, modeller og softwareversioner kan fuld funktionalitet ikke garanteres.

Oplysninger om "Dr. Curve + " app'en

Dr.Curve + -app'en er tilgængelig til Android og iOS. Scan den tilsvarende QR-kode for at gå direkte til download.

BEMÆRK:

Udbyder kan i et vist omfang opkræve gebyr ved download af app'en.



Google Play



App Store

Du kan også finde linket til download af app'en på vores hjemmeside:



Systemkrav til brug af app'en

- iOS 8.0 eller højere + Bluetooth 4.0 eller højere
- Android 4.4 eller nyere + Bluetooth 4.0 eller højere

Idriftsættelse med appen

1. Installer app'en "Dr. Curve " fra den tilsvarende App Store eller Google Play.
2. Aktiver Bluetooth i enhedens indstillinger.
3. Indtast dine brugerdata i app'en.
4. Vælg derefter i app'en "Kropsanalyse skalaer".
5. Tænd for enheden med ● knappen

BEMÆRK:

- Appen skal være åben på mobiltelefonen for at oprette forbindelse til skalaen.
- Enheden opretter kun forbindelse til app'en, hvis den er tændt med knappen.
- Sørg for, at din bruger er indstillet.
- Sørg for, at de samme måleenheder og vægt er angivet i app'en og skalaen.

6. Når vægten er tilsluttet app'en, vises symbolet i displayet 
7. Udfør målingen som beskrevet i afsnittet "Brug  Måling og analyse" fra punkt 2 og fremefter.

Brug**BEMÆRK**

- Knapperne er sensor touch knapper. Rør let ved tasterne med en finger for at udføre funktionen.
- Vægten er forudindstillet med måleenhederne "kg" og "cm".

For at indstille balancen til "lb" eller "st: lb" og "ft: in", skal du gøre som følger:

1. Tænd vægten ved at udøve let tryk på vejefladen med din fod.
2. Tryk gentagne gange på knappen  eller  indtil den ønskede vægtenhed vises. Måleenheden for højde har automatisk ændret sig med den.

Ren vejefunktion

1. Anbring vægten på badeværelset på en hård, flad overflade (undgå tæpper). Ujævn grund fører til unøjagtigheder.
2. Stå med begge fødder på skalaen. Enheden tændes automatisk
3. Fordel din vægt jævnt og vent, mens vægten bestemmer din vægt.
4. Displayet blinker først, og derefter vises din nøjagtige vægt.
5. Når du forlader vægten, slukker den automatisk efter ca. 15 sekunder, hvilket forlænger batteriets levetid.
6. Hvis vægten ikke bestemmes, mens "0.0" vises, slukker vægten automatisk efter ca. 15 sekunder.

Lagring af personlige data**BEMÆRK:**

- Vægten har forudindstillede værdier, som du kan ændre som beskrevet nedenfor.
- Udfør følgende trin hurtigt efter hinanden og inden for få sekunder. Ellers annullerer enheden automatisk inputtilstand.
- Hvis du holder en af knapperne ( / ) nede i ca. 2 sekunder under indstillingen, starter en hurtig kørsel.

1. Tryk på tasten  vælg hukommelsesplacering (f.eks. P0). Bekræft indstillingen med  eller vælg en anden hukommelsesplacering med  /  knappen. Tryk derefter på  for at gå til næste indstilling.
2. Symbolet for "mand" eller "kvinde" blinker. Bekræft indstillingen med  eller vælg med  /  Knap symbolet for dit køn. Tryk derefter på  for at gå til næste indstilling.
3. Den forudindstillede størrelse blinker. Brug knappen  eller  til at vælge din størrelse. Bekræft din indtastning med .
4. Den forudindstillede alder blinker. Brug knappen  eller  til at vælge din alder. Bekræft din indtastning med .
5. Den korte skærm "----" afslutter inputtilstanden for denne hukommelsesplacering. Du vil nu kunne se på displayet'et hukommelsesplaceringen, kønssymbolet og vægten "0,0 kg" (0,0 lb / 0: 00 st: lb).

Du har nu følgende muligheder:

- Tryk gentagne gange på knappen  for at få vist indstillingerne igen eller for at ændre indstillingerne.
- Du kan indstille yderligere lagerplaceringer. Fortsæt som beskrevet ovenfor.
- Du kan begynde at tage målinger med det samme.

Måling og analyse

Gem dine personlige data på en lagerplads på forhånd.

BEMÆRK:

- Den analytiske balance fungerer kun korrekt, hvis du står barfodet og om nødvendigt med dine fødsåler lidt fugtige på kontaktfladerne. Helt tørre fødsåler kan føre til utilfredsstillende resultater, da deres ledningsevne er for lav.
- Tør om nødvendigt kontaktfladerne en gang for at forbedre den styrende effekt.
- På grund af de store udsving i kropsfedtprocenten er det svært at få en retningslinje. Du skal derfor altid måle på samme tid på dagen for at få en sammenlignelig værdi.
- Vores krop består blandt andet af kropsfedt, kropsvand, muskelmasse og knoglevægt. På grund af den individuelle vandretention i disse hovedkomponenter kan de bestemte værdier variere. Dette er normalt og meget afhængig af kost og livsstil.

1. Tryk på tasten  og brug  /  for at finde lagerpladsen, hvor dine data er gemt. Hukommelsesplaceringen blinker i ca. 3 sekunder. Du vil så se hukommelsesplaceringen, kønssymbolet og vægten "0,0 kg" (0,0 lb / 0:00 st: lb) i displayet.
2. Stå med begge fødder på balancens kontaktflader (5).
3. Først blinker din vægt i displayet. Efter at displayet er stoppet med at blinke, begynder analysen. Under analysen vil du se en løbebånd "oooo" på displayet. Bliv på skalaen, indtil den sidste skærm (**body age**) vises.

Følgende resultater vises efter hinanden:

1. Vægten i den tidligere valgte enhed (kg / lb / st: lb)
2. Kropsfedtprocenten i % (**fedt**)
3. Kropsvandindholdet i % (**TBW**)
4. Procentdelen af muskelmasse i % ()
5. Knoglevægten i kg ()
6. Basal metabolisk hastighed af det daglige energibehov i **KCAL**
7. Body Mass Index (**BMI**)
8. Visceralt fedt ()
9. Den biologiske alder (**body age**)

De valgte værdier gentages derefter, og derefter slukkes balancen automatisk.

Evaluerer af resultaterne

Der er tunge mennesker, der har et afbalanceret forhold mellem fedt og muskelmasse, og der er tilsyneladende slanke mennesker med markant øgede kropsfedtværdier. Fedt er en faktor, der bidrager væsentligt til stress på organismen, især det kardiovaskulære system. Kontrollen af begge værdier (fedt og vægt) er derfor et grundlæggende krav til sundhed og fitness.

Kroppsfedt

Kroppsfedt er en vigtig del af organismen. Fra beskyttelse af leddene og opbevaring af vitaminer til regulering af kropstemperatur spiller fedt en vigtig rolle i kroppen. Så målet er ikke at reducere kroppsfedtprocenten radikalt, men at opnå og opretholde en balance mellem muskelmasse og fedtmasse.

Vandets betydning for vores helbred

Den menneskelige organisme består af omkring 55 - 60% vand i forskellige mængder afhængigt af alder og køn.

Vand udfører en række funktioner i kroppen:

- Det er byggestenen i vores celler. Dette betyder, at alle celler i kroppen, hvad enten det er hud, kirtel, muskler, hjerneceller eller andre, kun er funktionelle, hvis de indeholder nok vand.
- Det er et opløsningsmiddel til vigtige stoffer i vores organisme.
- Det er et transportmiddel for næringsstoffer, kroppens egne stoffer og metaboliske produkter.

Du kan finde referenceværdier til din fitnessprofil i vejledningstabelen. Det viser afhængigheden af kroppsfedtværdier på alder og køn. Husk altid, at som med vandbalancen i kroppen, er fedtprocenten også udsat for stærke udsving i løbet af dagen. Mål derfor altid på samme tid på dagen for at opnå en sammenlignelig værdi.

De beregnede resultater af kroppsfedt og kropsvandprocent er kun referenceværdier. De anbefales ikke til brug til medicinske formål. Søg altid råd fra din læge, hvis du har spørgsmål om medicinsk behandling eller en diæt for at opnå normal vægt.

Vejledningsværdier for procentdelen af kropsfedt i procent (omtrentlige tal)

Alder	Kvinder				Mænd			
	Undervægt	Normal	Overvægtig	Fedme	Undervægt	Normal	Overvægtig	Fedme
6-39	<21	21-33	33-39	>39	<8	8-19	19-25	>25
40-59	<23	23-35	35-40	>40	<11	11-22	22-28	>28
60-100	<24	24-36	36-42	>42	<13	13-25	25-30	>30

Referenceværdier for kropsvandindhold og muskelmasseprocent i procent (omtrentlige tal)

Alder	Kvinder				Mænd			
	Kropsvædske			Muskelmasse				Muskelmasse
	Lav	Normal	Høj		Lav	Normal	Høj	
6-15	<57	57-67	>67	>34	<58	58-72	>72	>40
16-30	<47	47-57	>57		<53	53-67	>67	
31-60	<42	42-52	>52		<47	47-61	>61	
60-100	<37	37-47	>47		<42	42-56	>56	

Referenceværdier for knoglevægt i kg (omtrentlige tal)

Kvinder				Mænd		
Kropsvægt	<45	45-60	>60	<60	60-75	>75
Knoglevægt	-2.6	-3.2	-8	-3.4	-3.8	-8

BMR (Basal Metabolisk Rate)

Basal Metabolic Rate (BMR) karakteriserer basal metabolisk hastighed. Basal metabolisk hastighed er den mængde energi i KCAL, som kroppen har brug for pr. dag i fuldstændig hvile, ved en ligegyldig temperatur (28 - 30 ° C) og på tom mave for at opretholde sin funktion (f.eks. når man sover).

Vejledende værdier for det daglige kaloriebehov uden fysisk aktivitet

Alder	Kvinder		Mænd	
	Vægt (kg)	KCAL	Vægt (kg)	KCAL
6-17	50	1265	60	1620
18-29	55	1298	65	1560
30-49	60	1416	70	1680
50-69	60	1302	70	1561
70-100	50	1035	65	1397

BMI (Body Mass Index)

Body Mass Index (BMI) relaterer legemsvægten til kvadratet i højden. BMI = vægt i kg: (højde i m x højde i m) Eksempel: En kvinde på 55 kg og 1,68 m høj. Dit BMI beregnes som følger: 55 kg. / (1,68 m x 1,68 m) ≈ 19,5 kg / m² normal vægt, værdien "kvadrat af kropsstørrelse" er ikke relateret til kropsoverfladen. BMI er kun en grov vejledning, da det ikke tager højde for køn eller den individuelle sammensætning af kropsmassen fra fedt og muskelvæv.

Vejledende værdier for BMI

BMI	Undervægt	Normal	Overvægtig	Fedme
	<18,5	18,5-27	30-38	>40

Bemærk, at hvis kroppen er meget muskuløs (Bodybuilder), indikerer fortolkningen af BMI, at du er overvægtig. Årsagen til dette er, at den langt over gennemsnitlige muskelmasse ikke tages i betragtning i BMI-formlen.


Vejledende værdier for det viscerale fedtindhold (omtrentlige tal)

Visceralfedt	Normal	Lidt for meget	For meget
	<9	10-14	>15

Displayvisninger og fejlmeddelelser

BEMÆRK:

Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet, skal du vente, indtil enheden slukker. Tænd den derefter igen for at genstarte driften. Hvis fejlvisningen ikke er ryddet, skal du tage batteriet ud af batterirummet i ca. 10 sekunder.

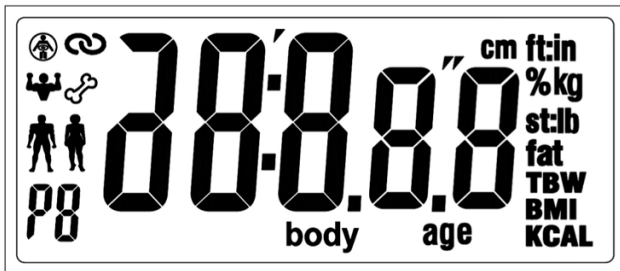Vises i displayet	Betydning
	Selvtest (efter isætning af batterierne) for den korrekte funktion af displayet
Lo	Lavt batteri
Err2	Procentdelen af kropsfedt er over eller under grænseværdien for måleområdet
Err	Vægten er over den tilladte maksimale vægt.

Rengøring

FARE:

- Nedsæk ikke vægten i vand, da dette kan ødelægge elektronikken.
- Brug ikke en stålbørste eller andre slibende genstande.
- Brug ikke hårde eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør enheden med en let fugtig, ikke våd klud. Sørg for, at der ikke trænger fugt eller væsker ind i enheden!
- Du kan bruge et kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel eller en simpel sæbe som tilsætningsstof.
- Efter rengøring af enheden skal du tørre det godt med en tør, blød klud.

Garanti betingelser

1. Vi giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra købsdatoen til privat brug af enheden. Hvis enheden er egnet til kommerciel brug, giver vi en garanti på 12 måneder for enheden, når den købes af et firma. Garantiperioden for forbrugere reduceres til 12 måneder, forudsat at de bruger en enhed, der er egnet til kommerciel brug - selv delvis - til kommercielle formål.
2. Forudsætningen for vores garantitjenester er køb af enheden i Tyskland fra en af vores autoriserede forhandlere og afsendelse af en kopi af købskvitteringen og dette garantibevis. Hvis enheden er i udlandet på tidspunktet for garantikravet, skal den stilles til rådighed for os på købers regning for at stille garantien.
3. Mangler skal rapporteres til os skriftligt inden for 14 dage efter, at de er synlige. Hvis garantikravet er berettiget, beslutter vi, hvordan skaden / manglen skal afhjælpes, enten ved reparation eller ved at udskifte en tilsvarende enhed.
4. Garantiservice leveres ikke for mangler, der er baseret på manglende overholdelse af brugsanvisningen, forkert håndtering eller normal slitage på enheden. Garantikrav er også udelukket for dele, der let kan brydes, såsom glas eller plast. Endelig er garantikrav udelukket, hvis organer, der ikke er autoriseret af os, udfører arbejde på enheden.
5. Garantiperioden forlænges ikke af garantitjenester. Der er heller ingen ret til nye garantier. Denne garantideklaration er en frivillig service af os som producent af enheden. De lovbestemte garantirettigheder (supplerende ydelse, tilbagetrækning, kompensation og prisnedsættelse) påvirkes ikke af denne garanti.

Garantibearbejdning

24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

Hvis din enhed viser en fejl inden for garantiperioden, har du den hurtigste og mest bekvemme måde at indgive en klage på via vores SLI - Internet-serviceportal.

www.sli24.de

Registrer serviceprocessen direkte på vores online serviceportal **www.sli24.de**. Et par sekunder efter afslutning af din registrering modtager du en gratis forsendelsesbillet via e-mail. Du vil også modtage yderligere oplysninger om, hvordan du behandler din klage. Med dine personlige adgangsdata, som sendes til dig via e-mail umiddelbart efter din registrering, kan du spore status for din proces online på vores serviceportal **www.sli24.de**. Alt du skal gøre er at sætte den gratis forsendelsesbillet på emballagen på din velpakkede enhed og aflevere pakken til nærmeste Deutsche Post / DHL-godkendelsespunkt. Forsendelse er gratis til vores servicecenter eller servicepartner.

Service kan være så enkel!

1. **Log ind**
2. **Pakning**
3. **Send det**

Færdig, det er så let!

Glem ikke at vedlægge en kopi af din salgskvittering (kvittering, faktura, følgeseddel) sammen med enheden som bevis for garanti, ellers kan vi ikke give nogen gratis garanti. Vores serviceportal **www.sli24.de** tilbyder dig yderligere tjenester:

- Downloadområde til brugsvejledning
- Downloadområde til firmwareopdateringer
- Ofte stillede spørgsmål, der tilbyder løsninger på problemer
- Kontaktformular
- Adgang til vores tilbehør og reservedele-webshops

Selv efter garantien er vi der for dig! - Billige reparationer til en fast pris!

Send under ingen omstændigheder din enhed mod at modtager betaler fragten. Vi accepterer ikke betaling af fragt. Dette medfører betydelige omkostninger.

Stand 06 2012

Bortskaffelse af batteri

Din enhed indeholder batterier. Hvis disse batterier er tomme, skal du være opmærksom på følgende:

FARE

Batterier / genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!

- Batterierne skal fjernes fra enheden.
- Tag brugte batterier til det ansvarlige opsamlingssted eller din forhandler.
- Du kan få oplysninger om offentlige indsamlingssteder i din by eller kommune.

Betydningen af symbolet "skraldespand"



Beskyt vores miljø, elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet.

Brug de indsamlede punkter til bortskaffelse af elektriske apparater, og aflever dine elektriske apparater der, som du ikke længere vil bruge.

Dermed hjælper du med at undgå de potentielle virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af forkert bortskaffelse. Ved at gøre dette bidrager du til genbrug, genbrug og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Du kan få oplysninger om, hvor enhederne skal bortskaffes, fra din lokale myndighed eller den lokale myndighed.